

LIFEPAK® CR2 Defibrillator

mit **LIFELINKcentral™**
AED-Programm-Manager

9819011812



LIFEPAK AED-System Vernetzt. Einsatzbereit.

Der plötzliche Herzstillstand tritt ohne Vorwarnung ein, überall und jederzeit.

Jedes Jahr trifft er unzählige Menschen aller Altersstufen auf der ganzen Welt, unabhängig von körperlicher Fitness und Lebenswandel – und die meisten überleben nicht.

Dennoch gibt es Hoffnung, denn eine Behandlung ist möglich: Defibrillation.

Tagtäglich werden durch die Verwendung eines automatisierten externen Defibrillators Menschen zu Lebensrettern.

LIFEPAK® CR2 Defibrillator

Lebensretter für öffentliche Bereiche

Ein plötzlicher Herzstillstand kann jedem widerfahren – jederzeit und überall. Eine sofortige Behandlung ist entscheidend. Die Überlebenschance eines Patienten nimmt mit jeder Minute ohne Behandlung drastisch ab. Aus diesem Grund sind öffentlich zugängliche Defibrillatoren so wichtig. Sie stellen eine lebensrettende Technologie dort zur Verfügung, wo sie am meisten bewirken kann. Wenn ein Notfall eintritt, sollten Sie also nur die beste Technologie verfügbar haben.

VERNETZUNG IST DIE GRUNDLAGE FÜR EINE BESSERE VERSORGUNG.

Über eine drahtlose Vernetzung kann alarmierten Rettungskräften ein vollständiges Bild bei plötzlichem Herzstillstand vermittelt werden. Treffen diese am Einsatzort ein, sind sie bereits auf den Patienten vorbereitet, da z.B. Einzelheiten der verabreichten Schocks oder ein EKG des Patienten bereitgestellt werden.

Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der bessere Technologie für bessere Ergebnisse sorgt – und für mehr gerettete Leben. Der bahnbrechende LIFEPAK CR2 Defibrillator mit dem LIFELINKcentral AED ProgramManager ist das Herzstück eines kompletten AED-Systems. Alles und jeder Beteiligte ist vernetzt, was unnötige Verzögerungen bei einem plötzlichen Herzstillstand verringert. Das ist genau die Technologie, die Sie von Stryker erwarten können.

Diese Versorgungskontinuität für den Patienten kann auch ins Krankenhaus und zu jedem Anbieter, der über das LIFENET®-System vernetzt ist, fortgesetzt werden. Nach einem Notfall-Ereignis können alle Informationen nahtlos versendet und in eine Patientenakte eingefügt werden, ohne Ereignisdaten direkt vom AED herunterladen zu müssen.

Selbst ungeschulte Anwender können schnell in nur 2 Schritten mit der lebensrettenden Versorgung beginnen:

1

Deckel öffnen
und Oberkörper des
Patienten entblößen.




2

Roten Griff
ziehen und
Elektroden anlegen.



Gemäß den ERC-Leitlinien können Überlebensraten bis auf 70 % erhöht werden, wenn Anwesende HLW mit minimalen Pausen durchführen und einen AED verwenden, um innerhalb von 3-5 Minuten nach Kollaps oder bevor Rettungskräfte eintreffen, einen Schock zu verabreichen.

LIFEPAK® CR2 Defibrillator

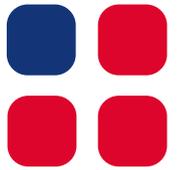

Lebensrettung kann einfacher sein als man denkt.



1-2

Zweistufiges Design mit leicht verständlichen großen Grafiken. Selbst völlig ungeschulte Anwender wissen eindeutig, was als erstes zu tun ist.



QUIK-STEP™-ELEKTRODEN

Elektroden werden direkt vom Gerät abgezogen, um sie schneller nebeneinander zu platzieren.



CPRINSIGHT®-ANALYSETECHNOLOGIE

Analysiert, um einen defibrillierbaren Rhythmus während der Thoraxkompressionen festzustellen, ohne dass eine Pause notwendig ist.



METRONOM UND HLW-COACHING

Sorgt für eine effektive Geschwindigkeit und bietet akustische Unterstützung, damit Anwender die richtige Technik bestimmen und gegebenenfalls korrigieren können.



CLEARVOICE™-TECHNOLOGIE

Erkennt Hintergrundgeräusche und passt die Lautstärke der Anweisungen entsprechend an.



HÖCHSTE VERFÜGBARE ENERGIE

Bis zu 360 J für effektivere Schocks, je nach Bedarf.



ZWEISPRACHIG

Umschalten zwischen zwei voreingestellten Sprachen bei der Verwendung des Geräts.




LIFEPAK TOUGH™

IP55-Schutzart für anspruchsvolle Umgebungen.

8yr

8-JÄHRIGE GARANTIE

Durch eine 8-jährige Garantie gedeckt.

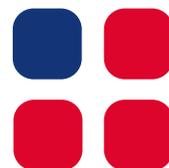

LIFEPAK® CR2 Defibrillator

mit LIFELINKcentral™



Defibrillator

- **standardmäßige Energieeinstellungen:** 200 J, 300 J, 360 J (Erwachsene), 35 J, 50 J, 75 J, 90 J (Kinder)
- **Shock Advisory System™:** EKG-Analysesystem - entspricht Kriterien für die Rhythmuserkennung in IEC 60601-2-4
- **cprINSIGHT®-Analysetechnologie:** Herzrhythmus des Patienten wird während der Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) analysiert
- **HLW-Coaching:** Anweisungen für HLW an Erwachsenen und Kindern

Benutzeroberfläche

- **Benutzeroberfläche:** klare visuelle und akustische Anweisungen
- **Sprach-Taste:** bei mehrsprachiger Konfiguration (optional) Umschalten zwischen den gewählten Sprachen
- **ClearVoice™-Technologie:** Anweisungen und Lautstärke des Geräts werden automatisch an den Geräuschpegel der Umgebung angepasst
- **Gerätestatusanzeigen:** visuelle und akustische Indikatoren zeigen die Systembereitschaft an (Gerät, Elektroden und Batterie)

LIFEPAK® CR2

(bitte wählen Sie Ihre gewünschte Konfiguration aus)

- | | |
|---|--------------------------|
| halbautomatisch | <input type="checkbox"/> |
| vollautomatisch <i>oder</i> | <input type="checkbox"/> |
| einsprachige Ausgabe | <input type="checkbox"/> |
| zweisprachige Ausgabe <i>oder</i> | <input type="checkbox"/> |
| mit Tasche | <input type="checkbox"/> |
| mit Tragegriff <i>oder</i> | <input type="checkbox"/> |
| mit Wandkasten für Außenbereich | <input type="checkbox"/> |
| mit Wandkasten für Innenbereich <i>oder</i> | <input type="checkbox"/> |
| mit WLAN | <input type="checkbox"/> |
| zusätzlich mit GSM-Karte <i>oder</i> | <input type="checkbox"/> |

weitere Merkmale

- Höhe: 9,7 cm, Breite: 22,6 cm, Tiefe: 27,4 cm, Gewicht: 2,0 kg
- **EKG-Speicher:** mind. 60 Minuten EKG-Aufzeichnung für zwei Patienteneignisse
- Elektroden: können bei Erwachsenen und auch bei Kindern verwendet werden
- Elektrodenverpackung: intuitiv anwendbare, schnell zugängliche Elektroden
- Wechselintervall Batterie und Elektroden: 4 Jahre
- USB-Anschluss
- WLAN 802.11 b/g/n
- 8 Jahre Garantie auf das Gerät

abhängig von der Konfiguration des Geräts:

- mobiler Datentransfer zur Vernetzung mit LIFELINKcentral (GSM-Karte)

bitte beachten Sie:
Durch eine Einweisung/Schulung vor Ort,
können ggf. weitere Kosten entstehen.

**Bitte senden Sie ein Angebot über _____ Stück Lifepak® CR2
mit der ausgewählten Konfiguration an folgende Adresse:**

Name/Einrichtung/Firma

Straße, PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Diese Produktinformation wurde überreicht
von (Name/Anschrift Kreisverband):